



Manual

Amfora

6200 4015

hidráulico carro de ducha

Basic UDI-DI: 872025610341762004015KL



Importante:

¡Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el Amfora!

Fecha de primera utilización
Usuario
Nombre
Dirección

Fabricante

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
T +31 (0)13 5239300
www.lopital.nl
info@lopital.nl

Todas las ayudas producidas por Lopital cumplen con las normas aplicables a los productos médicos de Clase I (MDR (UE) 2017/745).

Explicación de los símbolos en las “instrucciones de uso” y en las etiquetas			
	Atención		Siga las instrucciones de uso.
	Fecha de producción		Leer el protocolo de limpieza y desinfección.
	Información del fabricante		Antibacteriano
	Número de artículo		Temperatura
	Número de serie		Presión del aire
	Conformité Européenne		Nivel de humedad
	Dispositivo médico		Carga máxima

Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Introducción	5
1.2.	Seguridad	5
1.3.	Garantía	7
2.	Uso	7
2.1.	Primer uso	7
2.2.	Trabajar con el Amfora	9
3.	Funcionamiento	10
3.1.	Bloqueo de ruedas	10
3.2.	Barandilla lateral	10
3.3.	Ajuste del respaldo	10
3.4.	Movimiento hacia arriba/abajo	11
3.5.	Drenaje de agua	11
4.	Limpieza y mantenimiento	12
5.	Condiciones ambientales	13
6.	Eliminación de las piezas	13
7.	Especificaciones técnicas	13
7.1.	Estructura	13
7.2.	Dimensiones	14

1. Introducción

1.1. Introducción

El carro de ducha hidráulico Amfora es un dispositivo médico diseñado para el cuidado y el lavado de los usuarios de manera ergonómicamente responsable. La comodidad es la consideración principal tanto para el usuario como para el cuidador. El carro de ducha hidráulico es multifuncional en su uso y es compatible con otros dispositivos, como camas, sillas de ruedas y sillas de ducha, así como con equipos de elevación y dispositivos de transferencia, como el EasySlide. Estas son las funciones esenciales de un carro de ducha hidráulico.



La montura de la Amfora tiene un revestimiento antibacteriano. El recubrimiento contiene iones de plata. El revestimiento antibacteriano a base de iones de plata impide que se multipliquen y propaguen microorganismos peligrosos como bacterias, hongos y algas. La eficacia se confirmó en varias pruebas. Los gérmenes se redujeron de forma demostrable en poco tiempo hasta el 99,99%. El revestimiento sólo afecta a las bacterias que se encuentran en la superficie y no en los microorganismos presentes en el aire. El revestimiento protege a los usuarios u otras personas contra bacterias, gérmenes, virus u otros organismos nocivos que causan enfermedades. En una superficie sucia, el revestimiento pierde sus propiedades antibacterianas. Por tanto, una limpieza y desinfección adecuadas siguen siendo imprescindibles.

La vida útil técnica prevista del Amfora es de 10 años, siempre que el mantenimiento diario y periódico se lleve a cabo de acuerdo con el programa de mantenimiento especificado (*Ver apartado 5. Limpieza y mantenimiento*).

El Amfora es un producto médico de Clase I con marcado CE. Este marcado es conforme al Reglamento MDR (UE) 2017/745.

1.2. Seguridad



El incumplimiento de los siguientes puntos de seguridad y de las definiciones adicionales de estas instrucciones de uso podría dar lugar a situaciones peligrosas. Léalas detenidamente antes de usar el producto.

Utilice

- No está permitido cargar el Amfora con más de 150 kg.
- Utilice únicamente piezas originales, suministradas por Lopital.
- Utilice el Amfora en un entorno de trabajo limpio y ordenado.
- Solo el personal debidamente cualificado y acreditado está autorizado para utilizar el carro de ducha.

- Las ubicaciones en piscinas no se consideran «condiciones normales» y acortarán considerablemente la vida útil de determinados componentes.
- El Amfora no se puede utilizar en superficies con una inclinación lateral superior a 5 grados.
- El Amfora no se puede utilizar en superficies con una inclinación superior a 10 grados hacia delante o hacia atrás.
- El carro de ducha hidráulico debe utilizarse y limpiarse con agua a una temperatura inferior a 43 °C.
- Asegúrese de que el freno del Amfora esté accionado antes de transferir a los usuarios.
- Avise al cliente antes de mover el Amfora.
- El Amfora solo puede utilizarse en interiores.
- Traslade y desplace el carro de ducha únicamente en la posición más baja.
- No ajuste la altura del carro de ducha mientras lo desplaza.
- El carro de ducha no debe utilizarse para transportar cargas distintas de personas.
- Preste atención a los obstáculos al subir y bajar el carro de ducha.

Mantenimiento

- El carro de ducha hidráulico debe revisarse e inspeccionarse al menos una vez al año.
- Si la superficie de apoyo está dañada, sustitúyala por motivos de higiene.
- El servicio y mantenimiento del carro de ducha solo pueden ser realizados por personas cualificadas por Lopital.
- Los componentes estructurales del carro de ducha solo podrán ser sustituidos por personal de Lopital debidamente cualificado.
- Si el uso erróneo, el transporte, un accidente o un mantenimiento inadecuado provocan la deformación de la Amfora, esta ya no podrá utilizarse y deberá ponerse en contacto con el proveedor.

En caso de avería, deberá ponerse en contacto con Lopital o con su proveedor local.

Correo electrónico: info@lopital.nl



El Amfora solo puede ser utilizado por personas con experiencia en el trabajo con el grupo destinatario y que hayan seguido los vídeos de instrucciones / formación disponibles en el sitio web de Lopital.



El Amfora ha sido desarrollado y fabricado para su uso en entornos de asistencia profesional.



Realizar cambios en la construcción puede afectar la seguridad del Amfora. Además, las condiciones de responsabilidad y garantía de Lopital quedan sin efecto. Como resultado, el Amfora deja de cumplir con el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) sobre productos sanitarios.



Si se produce un incidente grave relacionado con este producto sanitario que afecte al cuidador o al cliente, debe notificarse a Lopital o al distribuidor del producto sanitario.

1.3. Garantía

Todos los productos Lopital se suministran con una garantía de 5 años contra defectos de construcción y/o materiales, a menos que se indique lo contrario. En caso de que varíen los términos de la garantía, el periodo exacto se indicará en su factura, que también sirve como justificante de garantía. Los componentes sometidos a desgaste no estarán cubiertos por la garantía, salvo que existan claros defectos de construcción y/o materiales.

2. Uso

2.1. Primer uso

Antes de utilizar el carro de ducha hidráulico, compruebe que todos los componentes indicados a continuación estén presentes. En caso de daño, estas piezas pueden ser sustituidas por personal cualificado.



2.2. Trabajar con el Amfora

Paso 1

Accione siempre el freno del carro de ducha durante la transferencia del usuario (*Ver el apartado 3.1. Bloqueo de ruedas*).

Paso 2

Coloque el carro de ducha junto a la cama, con el extremo de la cabeza alineado con la cabeza del usuario.

Paso 3

Abata la barandilla lateral del carro de ducha (*Ver el apartado 3.2. Barandilla lateral*).

Paso 4

Eleve la superficie del carro de ducha hasta situarla justo por encima del colchón de la cama y abata las barandillas laterales hacia abajo.

Paso 5

Deslice el carro de ducha entre el cabecero y el piecero de la cama hasta que sobresalga lo máximo posible sobre la cama.

Paso 6

Bloquee las ruedas del carro de ducha (*Ver el apartado 3.1. Bloqueo de ruedas*).

Paso 7

Diríjase al otro lado de la cama y coloque la EasySlide entre el usuario y el carro de ducha.

Paso 8

Utilice la EasySlide para deslizar al usuario de la cama al carro de ducha.

Paso 9

Eleve la superficie horizontal del carro de ducha unos centímetros y cierre las barandillas laterales.

Paso 10

Quite el freno del carro de ducha y retire la EasySlide (*Ver el apartado 3.1. Bloqueo de ruedas*).

3. Funcionamiento

3.1. Bloqueo de ruedas

- El freno se puede aplicar en el Amfora empujando hacia abajo el labio azul (1) de la rueda (Ver figura 1).
- Para quitar el freno del Amfora, se debe mover hacia arriba el mismo labio de la rueda golpeando ligeramente la parte superior del labio (2) (Ver figura 1).

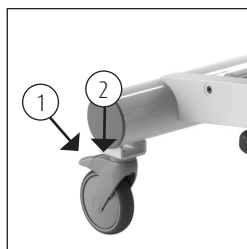


Figura 1. Bloqueo de ruedas.

3.2. Barandilla lateral

- El carro de ducha está equipado con barandillas laterales abatibles.
- La barandilla lateral está equipada con un sistema de seguridad que impide que el usuario pueda levantarla por sí mismo.
- Antes de abatir la barandilla lateral hacia abajo, debe desbloquearse el sistema de seguridad.
- Desbloquee el sistema de seguridad retirando los pasadores situados a ambos lados de la barandilla lateral (1).
- Abata la barandilla lateral desbloqueada hacia el exterior (3).
- Levante la barandilla lateral para volver a bloquearla en su posición. La barandilla lateral queda bloqueada en el carro de ducha al asegurar los pasadores en la posición correspondiente.

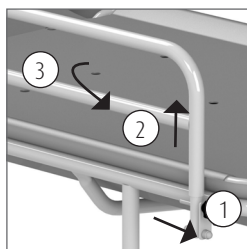


Figura 2. Barandilla lateral.

3.3. Ajuste del respaldo

El Amfora está equipado con un respaldo ajustable. Para ajustar el respaldo, afloje las dos perillas de ajuste situadas debajo de la sección del respaldo, a ambos lados. Coloque el respaldo en la posición deseada y, a continuación, apriete firmemente ambas perillas para bloquearlo de forma segura. Compruebe siempre que el respaldo esté correctamente fijado antes de utilizar el carro de ducha.

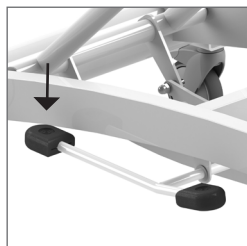


Figura 3. Movimiento ascendente.



Asegúrese siempre de que ambas perillas de ajuste estén completamente apretadas antes de atender a un usuario en el carro de ducha. Un respaldo que no esté correctamente bloqueado puede crear una situación insegura.

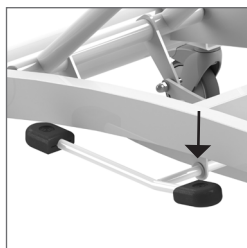


Figura 4. Movimiento hacia abajo.

3.4. Movimiento hacia arriba/abajo

Subiendo

- Si el cliente está tumbado en el carro de ducha, primero ponga el freno en las ruedas y luego mueva el carro hacia arriba.
- El carro se mueve hacia arriba presionando la parte larga del pedal con lentitud y uniformidad (*Ver figura 3*).
- Durante el uso del pedal, el cuidador se colocará junto al borde largo de la Amfora, de modo que no pueda girar la parte superior del cuerpo alejándola de los pies.
- Durante el movimiento hacia arriba, mantenga el contacto con el cliente.

Moviéndose hacia abajo

- El carro baja presionando la parte corta del pedal (*Ver figura 4*).
- El carro desciende por efecto de la gravedad. La velocidad de descenso se puede regular manteniendo el pedal ligeramente presionado.
- Durante el movimiento descendente, mantenga el contacto con el cliente.



Antes de mover el carro, compruebe que no haya personas ni objetos en las inmediaciones.

3.5. Drenaje de agua

- El agua se drena del Amfora a través de una manguera de drenaje.
- Retire la manguera del hueco y dirijala hacia el punto de drenaje más bajo posible.
- Durante el transporte, encaje siempre la manguera en el hueco de la placa horizontal para evitar fugas y goteos.

4. Limpieza y mantenimiento

El Amfora debe limpiarse después de cada uso, con agua y productos de limpieza domésticos habituales. No utilice productos de limpieza abrasivos ni agresivos. En caso necesario, los componentes PUR pueden desinfectarse con una solución de etanol o propanol al 70%.


Compruebe periódicamente que las ruedas no tengan pelos, polvo ni restos de jabón y elimínelos cuando sea necesario. El mantenimiento y las reparaciones de la Amfora sólo pueden ser realizados por personal cualificado.

Calendario de mantenimiento	
Después de cada uso	• El carro de ducha puede limpiarse con agua y productos de limpieza domésticos habituales.
Diariamente	• Limpiar y desinfectar la lona.
Semanal	• Limpie la estructura. • Compruebe si hay pelos, polvo y residuos de jabón en las ruedas y retírelos si es necesario. • Compruebe que el carro de ducha sigue funcionando correctamente.
Anualmente	• De acuerdo con el reglamento MDR (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, un carro de ducha debe mantenerse de acuerdo con las directrices del fabricante. Este proceso será realizado preferiblemente por Lopital u otro organismo cualificado. Lopital ofrece la opción de que el carro de ducha sea inspeccionado y revisada a fondo una vez al año mediante un mantenimiento preventivo periódico. Para obtener más información sobre el contrato de mantenimiento, póngase en contacto con Lopital (info@lopital.nl) o hable con su proveedor.


Para obtener una explicación detallada sobre la limpieza y desinfección, consulte el documento «Protocolo de limpieza y desinfección» en nuestro sitio web www.lopital.com/downloads.

5. Condiciones ambientales

Condiciones durante el almacenamiento y el transporte

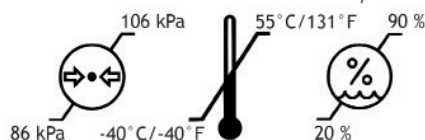

Condiciones durante el uso

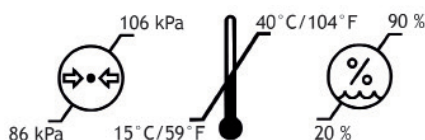

6. Eliminación de las piezas

Todas las piezas que se sustituyan o se retiren pueden devolverse a Lopital . También puede ofrecer las piezas al técnico para que las destruya . Nos aseguraremos de que todas las piezas se procesen de forma respetuosa con el medio ambiente.

7. Especificaciones técnicas

El Amfora es resistente a las salpicaduras, lo que significa que el Amfora se puede utilizar bajo la ducha. Esto se indica con la clasificación IPX4.

7.1. Estructura

Subchasis:	Aluminio + recubrimiento en polvo de 2 capas
Bastidor superior:	Acero + recubrimiento en polvo de 2 capas
Barras laterales:	Acero + recubrimiento en polvo de 2 capas
Ruedas:	Ø 12,5 cm, con doble bloqueo
Elementos de fijación:	Acero inoxidable + acero galvanizado
Peso:	63 kg
Carga máxima:	150 kg

7.2. Dimensiones

Dimensiones externas

(largo x ancho x alto):

190 x 74 x 50 a 100 cm

Manguera de drenaje de agua:



Diámetro interior Ø 4 cm

Distancia entre ejes:

120 cm

Ancho de vía:

65 cm

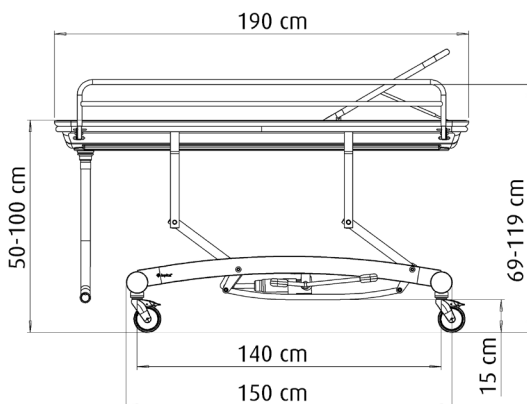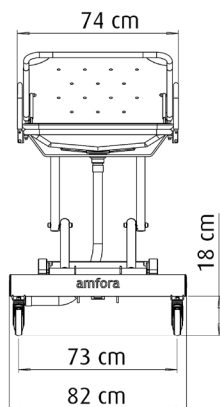



Para más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.com
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56,
5060 AB Oisterwijk, Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl,
www.lopital.nl

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.



Green Deal



MADE IN
THE NETHERLANDS



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001



Scan for
information